

3. 脱気装置

ご好評のAG、BGシリーズを、扱いやすく、よりトラブルの少ない脱気装置にリニューアルしました。脱気性能比較データを参考にいただき、用途に合わせてご選定ください。



Gastorr AG-42

Gastorr AG-44

製品名	溶媒脱気装置ガストール	
	AG-42-01	AG-44-01
型式	AG-42-01	AG-44-01
流路数	2	4
内部容量	340 μ L	
使用流量範囲	\leq 10 mL/min	
設定真空値	100 hPa 固定	
接続ネジ規格	1/4-28 UNF	
接液部材質	Teflon™ AF*1, PFA, PPS	
外部入出力信号	—	
寸法	108 (H) \times 70 (W) \times 240 (D) mm, 突起部を除く	
質量	約 2.1 kg	
電源仕様	AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz), MAX 80 VA	
商品コード	SGA-G3001	SGA-G3002
価格 (税抜)	¥ 180,000	¥ 220,000


*1: Teflon™ AFは米国ケマーズ社の登録商標です。
注意: フッ素系溶媒はご使用いただけませんのでご注意ください。

溶媒脱気装置 Gastorr AG Series

自己洗浄機能を一新した高精度な溶媒脱気装置

特長

- テフロン™AFチューブを採用し、内部容量を最小化
- 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付
- CPU制御による安定した真空制御
- 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止
- 2流路と4流路より選択可能

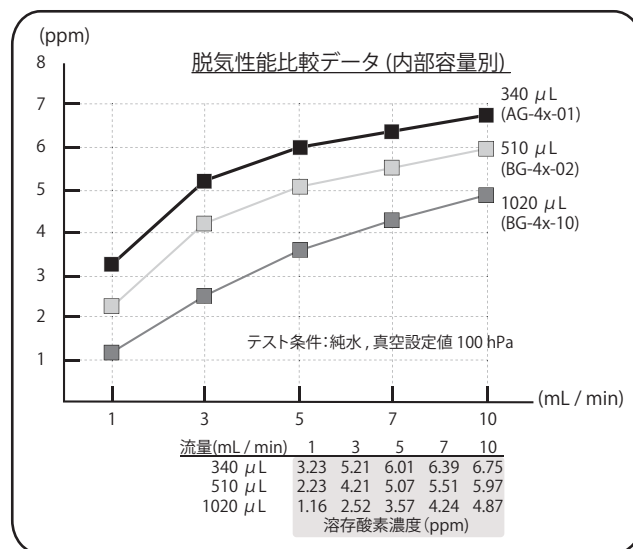

※: ご使用条件により脱気性能は異なる場合がございます。

溶媒脱気装置 Gastorr BG Series

より高い脱気性能を追求した容量アップモデル

特長

- テフロン™AFチューブを採用し、内部容量を最小化
- 使用流速に合わせて2種類の内部容量をラインアップ
- 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付
- CPU制御による安定した真空制御
- 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止
- 2流路と4流路より選択可能
- チャンバー内の真空値をリアルタイムで表示 (有機ELディスプレイ)



Gastorr BG-42

Gastorr BG-44

製品名	溶媒脱気装置ガストール			
	BG-42-02	BG-44-02	BG-42-10	BG-44-10
型式	BG-42-02	BG-44-02	BG-42-10	BG-44-10
流路数	2	4	2	4
内部容量	510 μ L		1020 μ L	
使用流量範囲	\leq 10 mL/min			
設定真空値	100 hPa 固定			
接続ネジ規格	1/4-28 UNF			
接液部材質	Teflon™ AF*1, PFA, PPS			
外部入出力信号	入力: —, 出力: エラー			
寸法	108 (H) \times 70 (W) \times 240 (D) mm, 突起部を除く			
質量	約 2.1 kg			
電源仕様	AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz), MAX 80 VA			
商品コード	SGA-G3003	SGA-G3004	SGA-G3005	SGA-G3006
価格 (税抜)	¥ 210,000	¥ 250,000	¥ 250,000	¥ 330,000

*1: Teflon™ AFは米国ケマーズ社の登録商標です。
注意: フッ素系溶媒はご使用いただけませんのでご注意ください。